



[ Illustration nicht verbindlich ]

## h/p/cosmos para analysis®

PC-Software für die Leistungsdiagnostik

### h/p/cosmos para analysis 2.0

PC-Software für professionelle Analysen und Auswertungen in der komplexen Leistungsdiagnostik mit individuellen Reportfunktionen und Trainingsplanerstellung.

#### Grundfunktionen

- Auswertung von Laktat- und Herzfrequenzkurven
- Individuelle Testmethoden und Belastungsprotokolle
- Freie Wahl des Schwellenwertmodells
- Benutzerdefinierte Trainingsbereiche und -intensitäten
- Editierbare grafische und tabellarische Auswertung
- Einzel- und Gruppenanalyse (Längs- und Querschnittsanalyse)
- Auswertung der Erholungsphase
- Erstellung von Energiebilanzen in Abhängigkeit des Trainingsumfang und der -intensität
- Modul zur Erstellung individueller Trainingspläne
- Schnittstelle zum direkten Einlesen der Herzfrequenzkurve aus den Herzfrequenzmessern der POLAR S-Serie
- Schnittstelle zum direkten Einlesen von Laktatwerten
- Formulareditor zur Ausdruckgestaltung mit individueller Berichterstellung mit Ihrem Logo / Layout
- Auswertungsmodul für den UKK 2 km Gehstest

#### h/p/cosmos para analysis 2.0 "basic" [cos14710]

- Alle Grundfunktionen

#### h/p/cosmos para analysis 2.0 "professional" [cos14708]

zusätzlich zu den Grundfunktionen ...

- Steuermodul für Laufband-Ergometer (coscom-Protokoll) für individuelle Belastungsprofile mit Vor-, Haupt- und Nachbelastungsphasen inkl. Cool-Down-Funktion
- Steuermodul für Hochleistungsergometer CYCLUS 2

#### Lieferumfang

CD-ROM inkl. Demo-Version h/p/cosmos para graphics sowie der Freeware h/p/cosmos para control, Lizenzdongle, Handbuch auf CD (Adobe Acrobat pdf-Datei)


NICHT im Lieferumfang enthalten:  
PC / Laptop und andere Hardware.

Für die Verbindung von PC und h/p/cosmos Laufband-Ergometer benötigen Sie ein RS232-Schnittstellenkabel (cos0097010035) und ggf. einen USB/RS232-Adapter (cos12769).

Für die Verbindung von PC und CYCLUS 2 benötigen Sie ein spezielles RS232-Schnittstellenkabel (cos1415).

#### Systemanforderungen

PC oder Laptop mit ...  
Windows 95 / 98 / 2000 / NT4.0 / XP  
VGA-Grafikkarte min. 800 x 600  
mindestens 256 MB RAM-Speicher  
mindestens 250 MB freier Festplatten-Speicher  
mindestens Pentium Prozessor  
CD-ROM Laufwerk  
1 freie USB-Schnittstelle für Registrierungs-Dongle

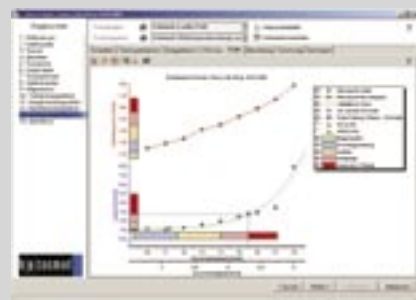

Autorisierter h/p/cosmos Fachhändler

